


Physio-Tech

MRI同期装置


MS-07

MS-07は、MRI装置との同期刺激を可能にする装置です。
MRI同期信号は光ファイバー、D-Sub、BNCでの入力を切り替えて使用できます。
コンピュータ側のデジタル入力に合わせたケーブル及びUSBケーブルが付属しております。

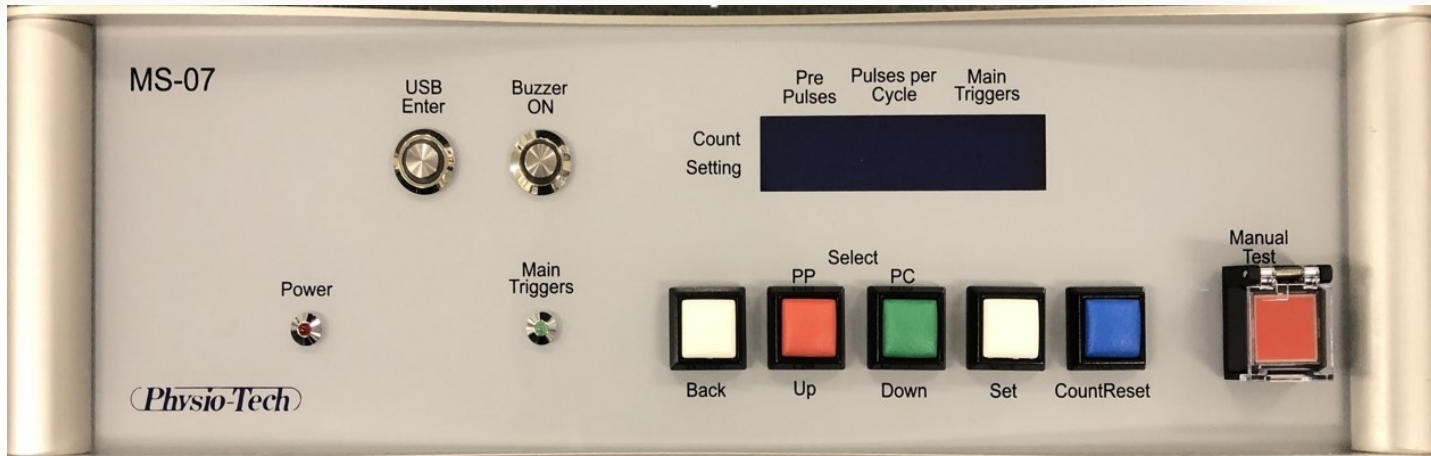

MRI同期信号を設定した回数ごとにカウントし、トリガーを出力できますので、ダミーカウントの処理、ブロックデザインのプログラムや、スコープトリガーの管理などが容易に行えます。加えて、USBキーボード互換出力モードにEnterキー出力機能を追加しましたので、簡単なスライド表示のソフトウェアにも使用ができるようになりました。

撮像の流れ

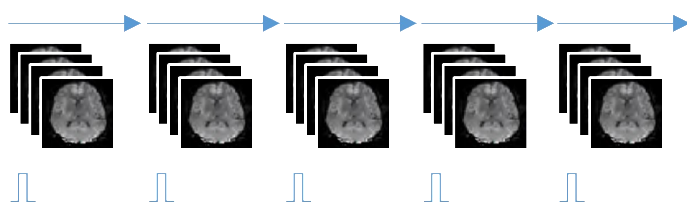

MR同期信号

MS-06Cで管理

パルス10回につき、1回になど

PC内刺激制御ソフトウェア
スライドショー提示などの
タイミングに使用！

2022/07

Physio-Tech

株式会社 フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3 4F

TEL: 03-3864-2781 FAX: 03-3864-2787

Email: sales@physio-tech.co.jp

Website: http://www.physio-tech.co.jp